

**V61**

# **Helium Neon Laser**

Donata Osthues  
donata.osthues@tu-dortmund.de

Jonas Rönsch  
jonas.roensch@tu-dortmund.de

Durchführung: 02.02.2021

Abgabe: 12.02.2021

TU Dortmund – Fakultät Physik

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Zielsetzung</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Theorie</b>	<b>3</b>
2.1	Prinzip eines Helium-Neon-Lasers . . . . .	3
2.2	Stabilität eines optischen Resonators . . . . .	4
2.3	Resonatormoden . . . . .	4
<b>3</b>	<b>Durchführung</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Auswertung</b>	<b>8</b>
4.1	Überprüfung der Stabilitätsbedingung und Untersuchung des Multimodenbetriebs	8
4.1.1	Untersuchung des Multimodenbetriebs . . . . .	8
4.2	Beobachtung der TEM-Moden . . . . .	10
4.2.1	Beobachtung der TEM <sub>00</sub> -Mode . . . . .	10
4.2.2	Beobachtung der TEM <sub>10</sub> -Mode . . . . .	11
4.3	Bestimmung der Polarisierung . . . . .	13
4.4	Bestimmung der Wellenlänge . . . . .	15
<b>5</b>	<b>Diskussion</b>	<b>17</b>
5.1	Stabilitätsbedingung . . . . .	17
5.2	Multimodenbetrieb . . . . .	17
5.3	TEM-Moden . . . . .	17
5.4	Polarisation . . . . .	17
5.5	Wellenlänge . . . . .	18
	<b>Literatur</b>	<b>19</b>

# 1 Zielsetzung

In diesem Versuch soll der Aufbau eines Helium-Neon-Lasers untersucht werden. Genauer soll die Stabilitätsbedingung des Lasers überprüft, zwei transversal emittierte Moden (TEM-Moden) vermessen, die Polarisation des ausgesandten Lichtes gemessen und die Wellenlänge bestimmt werden.

## 2 Theorie

In diesem Versuch wird ein Helium-Neon-Laser (light amplification by stimulated emission of radiation) verwendet.

### 2.1 Prinzip eines Helium-Neon-Lasers

Allgemein ist ein Laser aus drei Hauptbestandteilen aufgebaut. Damit sind ein verstärkendes Medium, ein Resonationssystem und eine Energiepumpe gemeint. Das verstärkende Medium ist in diesem Fall das Helium-Neon-Gasgemisch, welches sich in einer Glasröhre befindet, an deren Enden sogenannte Brewster-Fenster angebracht sind. Fällt Licht auf die Brewster-Fenster ein, das parallel zu ihrer Ebene polarisiert ist, so kann es die Fenster unreflektiert passieren. Restliche Polarisationsrichtungen werden jedoch zu einem Teil reflektiert. Eine Polarisationsrichtung wird also gegenüber den anderen bevorzugt (Mode des Lasers). Hinter den Brewster-Fenstern befinden sich die Elemente des Resonators. Es sind zwei Spiegel, die unterschiedlich gewölbt sein können. Das bedeutet, es handelt sich um einen optischen Resonator, indem sich eine stehende Welle durch Interferenz bilden kann, falls die halbe Wellenlänge des Lichtes ein Vielfaches der Resonatorlänge ist.

Generell ist die Wellenlänge des Lasers von den Energieübergängen abhängig, die in ihm stattfinden. So gilt für die Frequenz des emittierten Lichtes

$$\nu = \frac{E_k - E_i}{h}. \quad (1)$$

In dieser Gleichung beschreibt  $E_k$  die Energie des angeregten und  $E_i$  die Energie des tieferen Zustandes [1]. Die Wellenlänge lässt sich dann mittels eines Gitters bestimmen, wobei die Gitterformel

$$\lambda = \frac{b \cdot a}{\sqrt{d^2 + a^2}} \quad (2)$$

gilt.  $a$  ist der Abstand der Maxima hinter dem Gitter,  $b$  die Spaltbreite und  $d$  die Distanz zum Schirm auf den die Maxima projiziert werden [5].

Damit es zu Übergängen dieser Art kommen kann, muss zunächst Energie in das System gepumpt werden. Im Laseraufbau sind dafür zwei Elektroden an den Enden des Glasröhrchens installiert, sodass ein Strom von einer Elektrode zur anderen durch das Gas fließen kann. Dabei wird das Gas, bzw. die Heliumatome ionisiert und angeregt, sodass es sich auf einem Energieniveau von annähernd gleicher Höhe wie Neon befindet.

Dann können die Heliumatome Stöße zweiter Art mit Neon durchführen. Das führt zu einer Anregung der Neonatome, sodass von Besetzungsinversion gesprochen werden kann. Eine initiale spontane Photonemission eines angeregten Neonatoms führt daraufhin zu stimulierter Emission durch weitere angeregte Neonatome. Diese Photonen bilden das Laserlicht. Wenn ihre Polarisation nicht durch die Brewster-Fenster reflektiert wird, dann werden sie durch die Resonatorspiegel immer wieder durch das verstärkende Medium geleitet, woraufhin es zu immer mehr stimulierter Emission kommt. Schließlich kann der Laserstrahl das System durch einen der teildurchlässigen Resonatorspiegel verlassen. Dadurch entsteht jedoch auch ein Auskopplungsverlust [5].

Der verwendete Helium-Neon-Laser ist ein Vier-Niveau-Laser, wobei für die Energieniveaus gilt:  $E_0 < E_1 < E_2 < E_3$ . Bei einem solchen Laser wird von  $E_0$  nach  $E_3$  gepumpt. Außerdem gilt die Bedingung, dass der Übergang von  $E_1$  nach  $E_0$  durch spontane Emission sehr schnell verläuft, sodass die entsprechenden Elektronen schneller wieder auf  $E_3$  gepumpt werden, als sie von dort aus wieder zurück in den Grundzustand sinken können. Außerdem muss die Bedingung gelten, dass der Übergang von  $E_2$  nach  $E_1$  sehr langsam verläuft. Dann sammeln sich viele Elektronen in  $E_2$  [4].

## 2.2 Stabilität eines optischen Resonators

Allgemein kann zwischen instabilen und stabilen Resonatoren unterschieden werden. Als stabil gilt ein Resonator genau dann, wenn der Lichtstrahl den Resonator immer wieder durchläuft und nicht nach einigen Umläufen komplett ausgekoppelt wird. Stabilität wird dann erreicht wenn die Länge des Resonators einem Vielfachen der halben Wellenlänge des Lichtes entspricht. Dann ergibt sich eine stehende Welle, deren Frequenz anderen Moden gegenüber bevorzugt wird, da sie durch wiederholtes Durchlaufen des Mediums weitere Emission dieses Spektrums induziert. Es wird von gespeicherter Pumpenergie innerhalb dieser Strahlungsenergie gesprochen. Zur Realisation eines stabilen Resonators muss die Stabilitätsbedingung

$$0 < g_1 \cdot g_2 < 1 \text{ bzw. } g_1 = g_2 = 0 \quad (3)$$


gelten, wobei die Stabilitätsparameter  $g_i$  über die Relation

$$g_1 \cdot g_2 = \left(1 - \frac{d}{b_1}\right) \cdot \left(1 - \frac{d}{b_2}\right) \quad (4)$$


definiert sind. In Gleichung (4) bezeichnen die Parameter  $b_i$  die Krümmungsradien der Resonatorspiegel, wobei auch  $b_i = \infty$  gelten kann, wenn es sich um einen flachen Spiegel handelt.  $d$  bezeichnet den Abstand zwischen den Spiegeln. Das bedeutet Gleichung (4) ist für zwei konkave Spiegel quadratisch in  $d$  und zeigt für einen flachen und einen konkaven Spiegel eine lineare Abhängigkeit von  $d$  [1].

## 2.3 Resonatormoden

Die Realisation des Lasereraufbaus ermöglicht eine Multimodenstruktur. Das bedeutet innerhalb des Resonator überlagern sich mehrere Moden, sogenannte  $TEM_{mn}$ -Moden.

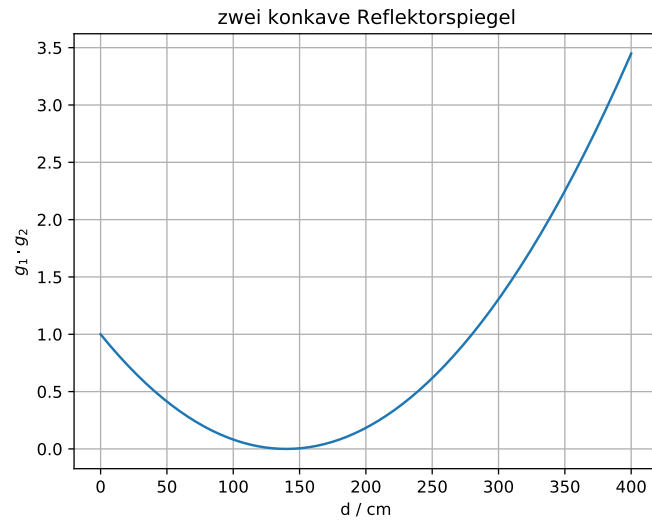


**Abbildung 1:** Auf dieser Abbildung ist der Verlauf von Gleichung (4) dargestellt, wobei für die Parameter  $b_1 = b_2 = 140 \text{ cm}$  gilt.

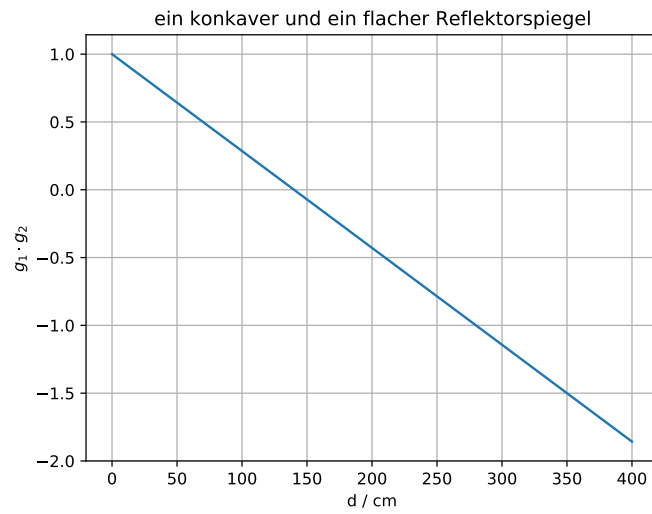

**Abbildung 2:** Auf dieser Abbildung ist ebenfalls der Verlauf von Gleichung (4) dargestellt, wobei für die Parameter  $b_1 = \infty$  und  $b_2 = 140 \text{ cm}$  gilt.

TEM steht für transversale elektromagnetische Mode und die Indizes beschreiben die Ordnung der radialen und transversalen Moden. In Lasern, deren Polarisation durch bspw. Brewster-Fenster linear ist, ergeben sich rechtwinklige Moden, wie sie auf Abbildung 3 dargestellt sind. Ohne selektiv wirkende optische Filterelemente erscheint

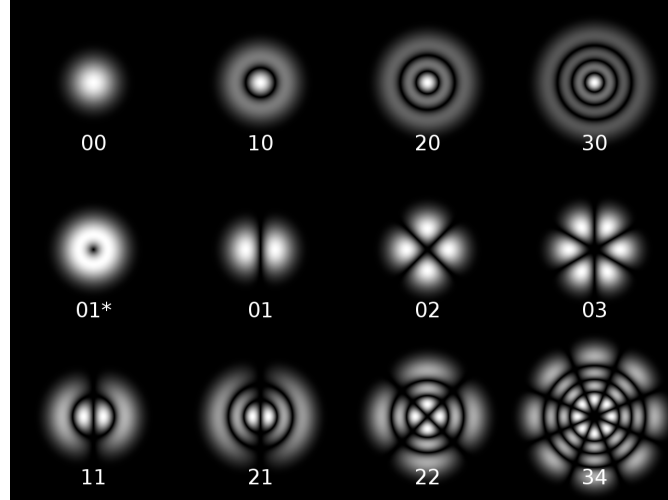

**Abbildung 3:** Diese Abbildung zeigt verschiedene rechtwinklige  $TEM_{mn}$ -Moden eines Lasers mit Brewster-Fenstern, wie er in diesem Versuch genutzt wurde. [3].

auf einem Schirm hinter dem Ausgang des Lasers immer die  $TEM_{00}$ -Mode, da sie eine Überlagerung aller Moden darstellt. Mit entsprechenden Modenfiltern können diverse Moden herausgefiltert werden, sodass auch andere  $TEM_{mn}$ -Moden dargestellt werden können. Die Amplitudenverteilung jeder  $TEM_{mn}$ -Mode kann über die Formel

$$A_{mn}(x, y, z) = C_{mn} H_m(x^*) H_n(y^*) \exp\left(-\frac{x^{*2} + y^{*2}}{4}\right) \exp(-i\Phi(x, y, z)) \quad (5)$$

bestimmt werden, wobei  $C_{mn}$  ein Normierungsfaktor,  $H_m$  und  $H_n$  die Hermite-Polynome und  $x^*$  und  $y^*$  die normierten Koordinaten mit  $x^* = \sqrt{2}x/\omega$  und  $y^* = \sqrt{2}y/\omega$  beschreiben. Dabei gilt für  $\omega$  die Definition

$$\omega(z) = \sqrt{\lambda \frac{d}{2\pi} \left(1 + \left(\frac{2z}{d}\right)^2\right)} \quad (6)$$


mit der Wellenlänge  $\lambda$ . Bezüglich der Intensitätsverteilung gilt die Proportionalität

$$I(x, y) \propto |A_{mn}|^2 \quad (7)$$

[1].

### 3 Durchführung

Der verwendete Versuchsaufbau ist in Abbildung 4 dargestellt. Der Laser befindet sich auf

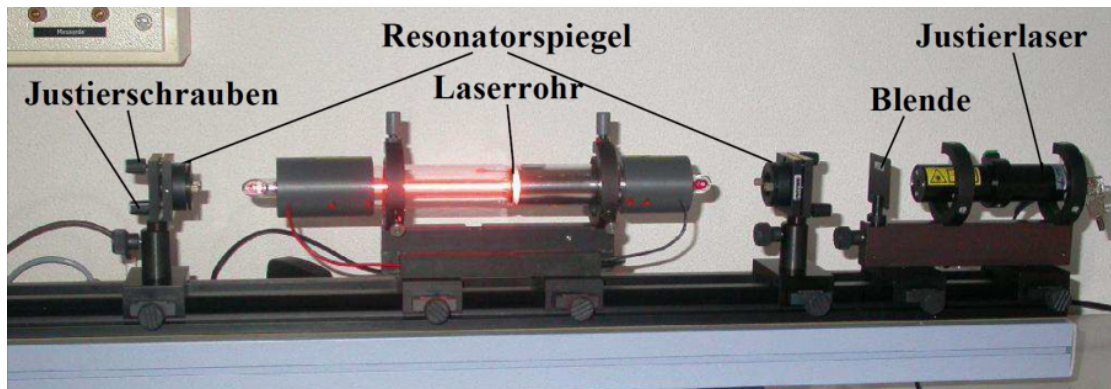

**Abbildung 4:** Auf dieser Fotografie ist der Versuchsaufbau mit seinen Hauptkomponenten abgebildet [2].

einer optischen Schiene zusammen mit einem grünen Justierlaser der reduzierten Leistung  $P = 0,2 \text{ mW}$ . zur Justage muss dieser grüne Laser auf eine Achse mit der optischen Bank gebracht werden. Das Laserrohr des Helium-Neon-Lasers hat eine Länge von  $l = 408 \text{ mm}$  und einen Durchmesser von  $d = 1,1 \text{ mm}$ . Die zugehörigen Resonatorspiegel haben einen Durchmesser von  $D = 12,7 \text{ mm}$ . Der Krümmungsradius der verwendeten konkaven Spiegel beträgt  $b = 140 \text{ cm}$ .

Nach erfolgreicher Justage kann das Messprogramm gestartet werden.

- Als erstes werden die Stabilitätsbedingungen für zwei konkave und für einen flachen und einen konkaven Resonatorspiegel überprüft. Dafür wird der Abstand der Spiegel langsam erhöht, bis kein Lasersignal mehr entsteht.
- Für zwei konkave Spiegel wird hierbei gleichzeitig das Fourierspektrum der Laserintensität mit einer Photodiode für verschiedene Resonatorlängen vermessen. Die Photodiode wird dafür in dem Strahlengang befestigt und mit einem Oszilloskop verbunden, auf dem das Fourierspektrum vermessen werden kann.
- Danach werden die Intensitäten der  $TEM_{00}$ - und  $TEM_{10}$ -Mode vermessen, wobei ein Wolfram-Draht senkrecht zur Strahlachse als Modenfilter zur Realisation der  $TEM_{10}$ -Mode in das System eingebracht wird. Danach wird eine Photodiode senkrecht zum Draht entlang eines Schirms, auf dem die Moden sichtbar sind, verschoben und die Intensitäten werden in Abhängigkeit des Abstandes notiert.
- Als letztes wird die Polarisation des Laserlichtes bestimmt, indem ein Polarisator in dem Strahl positioniert wird und die Intensität hinterm Polarisator in Abhängigkeit der Polarisationsrichtung mit einer Photodiode vermessen werden kann.

## 4 Auswertung

Als erstes wird die Stabilitätsbedingung untersucht. Danach werden der Multimodenbetrieb und die TEM-Moden ausgewertet und zum Schluss werden die Polarisierung und Wellenlänge des Lasers bestimmt.

### 4.1 Überprüfung der Stabilitätsbedingung und Untersuchung des Multimodenbetriebs

Um die Stabilitätsbedingung zu überprüfen wird zunächst eine Spiegelkonstellation mit einem flachen und einem konkaven ( $r = 1400 \text{ mm}$ ) Spiegel verwendet. Laut Gleichung (4) ist die Stabilitätsbedingung erfüllt, wenn der Abstand die Bedingung  $d > 1400 \text{ mm}$  erfüllt. Für diese Spiegelkonstellation konnte bis zu einem Abstand von  $d = 980 \text{ mm}$  ein Laserstrahl erzeugt werden. Dieses Ergebnis liegt unter dem theoretischen Wert und wird in der Diskussion erläutert.

Die folgende Spiegelkonstellation besteht aus zwei konkaven Spiegeln mit einem Radius von jeweils  $r = 1400 \text{ mm}$ . Die Stabilitätsbedingung ist erfüllt, wenn der Abstand kleiner als  $d = 2800 \text{ mm}$  ist. Die Stabilitätsbedingung kann bis zu einem Abstand von  $1763 \text{ mm}$  gezeigt werden. Für größere Abstände reicht der Versuchsaufbau nicht aus.

#### 4.1.1 Untersuchung des Multimodenbetriebs


Um den Multimodenbetrieb zu untersuchen muss die Intensität mit einer schnellen Photodiode aufgenommen werden. Die Frequenzen der Intensitätsmaxima werden, in Abhängigkeit des Spiegelabstandes, mithilfe einer Fouriertransformation ermittelt. Die Messdaten sind in Tabelle ?? aufgelistet.

**Tabelle 1:** Messdaten für die Untersuchung des Multimodenbetriebs.

	$d = 730 \text{ mm}$	$d = 848 \text{ mm}$	$d = 1350 \text{ mm}$	$d = 1763 \text{ mm}$
$n$	$f / \text{MHz}$	$f / \text{MHz}$	$f / \text{MHz}$	$f / \text{MHz}$
1	236,6	176,6	119,0	88,0
2	473,1	352,8	239,0	182,0
3	709,8	527,5	357,0	272,0
4	-	704,9	476,0	360,0
5	-	879,1	596,0	452,0
6	-	-	-	537,0
7	-	-	-	627,0

Alle Intensitätsmaxima müssen die Gleichung  $f = \frac{nc}{2d}$  erfüllen. Um das zu überprüfen, kann die Frequenz gegen  $n$  aufgetragen werden und eine lineare Ausgleichsgerade bestimmt werden. Die Steigung der Geraden muss den Wert  $\frac{c}{2d}$  haben. Die Messdaten, Ausgleichsgeraden und Theoriegeraden sind in Abbildung ?? abgebildet.



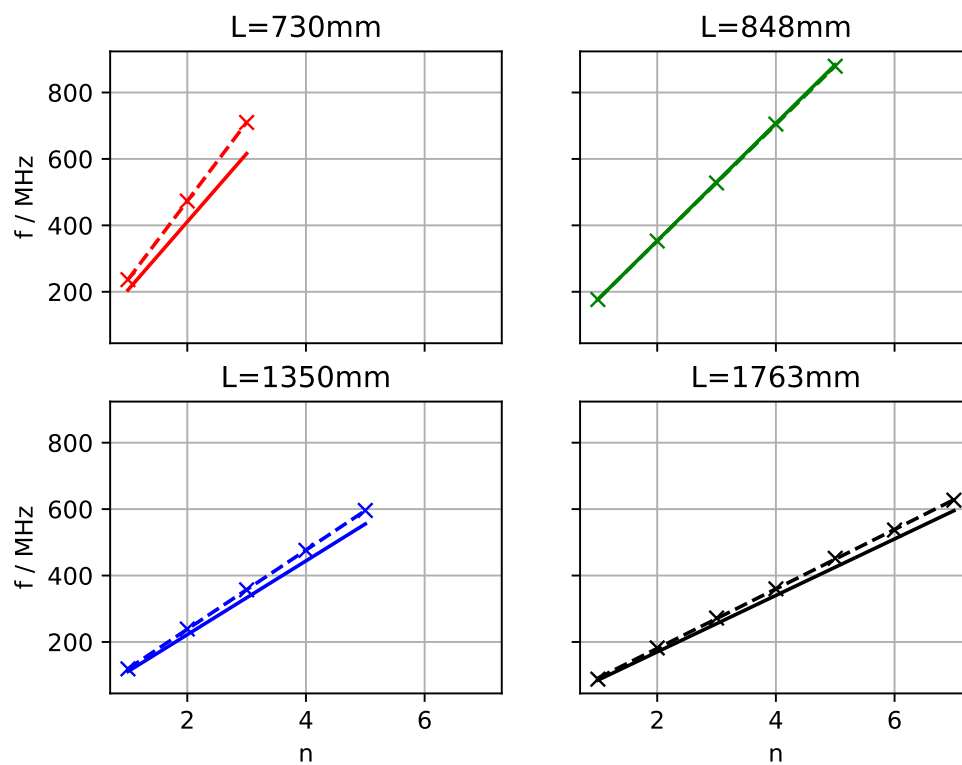

**Abbildung 5:** Plots der verschiedenen Abstände um die Bedingung der Frequenzen zu überprüfen. Hierbei sind die Kreuze die Messdaten, die gestrichene Linie die Ausgleichsgerade und die durchgezogene Linie die Theoriegerade.

Die Steigungen der Ausgleichsgeraden und die dazugehörigen theoretischen Werte sind in der Tabelle 2 aufgelistet.

**Tabelle 2:** Steigungen der Ausgleichsgeraden und theoretische Werte zur Überprüfung des Multimodenbetriebs.

Abstand $d$ / mm	Steigung $a_{\text{gemessen}}$ / MHz	Steigung $a_{\text{theoretisch}}$ / MHz
730	$236,60 \pm 0,06$	205,34
843	$175,71 \pm 0,25$	176,76
1350	$119,10 \pm 0,19$	111,03
1763	$89,5 \pm 0,4$	85,02

Keine der theoretischen Steigungen liegt in der Unsicherheit der gemessenen Steigung, allerdings sind die Größenordnungen in jedem der Fälle richtig.

## 4.2 Beobachtung der TEM-Moden

Um die TEM-Moden zu beobachten wird der Laserstrahl mit einer Streulinse vergrößert und mit einer Photodiode wird die Intensität senkrecht zur Strahlachse gemessen. Es werden zwei Moden untersucht.

### 4.2.1 Beobachtung der TEM<sub>00</sub>-Mode

Die aufgenommenen Intensitäten sind in Tabelle 3 aufgelistet.


**Tabelle 3:** Aufgenommene Intensitäten für die Untersuchung der TEM<sub>00</sub>-Mode.

Abstand zum Strahlmittelpunkt $a$ / mm	Intensität $I$ / A
−8,0	0,048
−6,0	0,189
−4,0	0,423
−3,0	0,657
−2,0	0,917
0,0	1,316
2,0	1,042
4,0	0,545
6,0	0,385
8,0	0,35
10,0	0,203
12,0	0,39

Wie in Abbildung 6 zu sehen ist, wird an die gemessenen Daten eine Gaußfunktion

$$G(x) = G_0 \exp \left( - \left( \frac{x - \mu}{\sqrt{2}\sigma} \right)^2 \right) \quad (8)$$

gefittet.

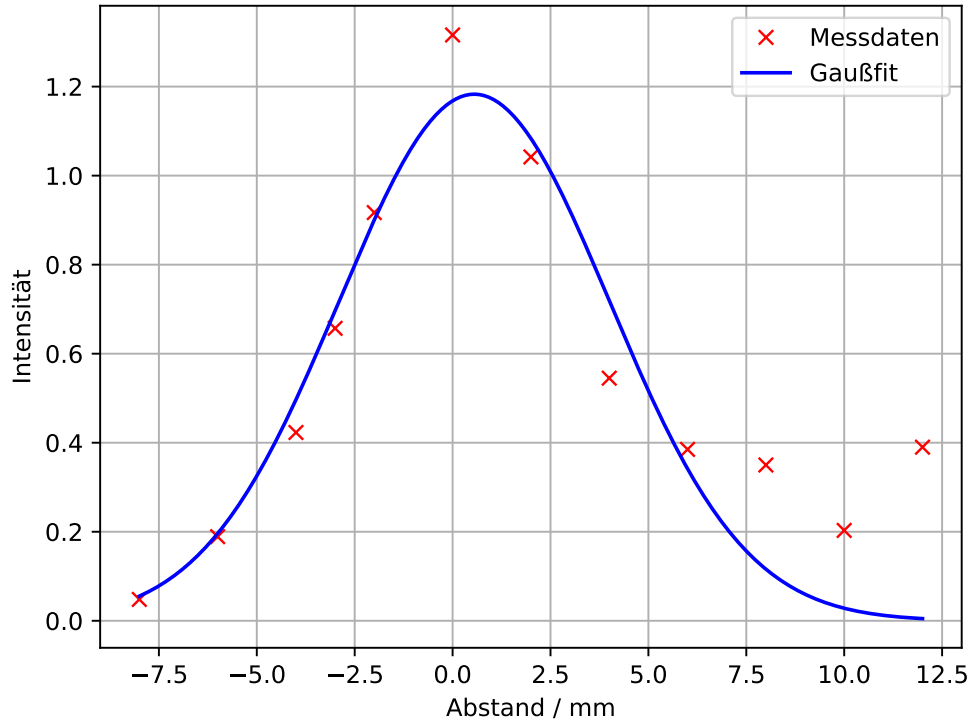

**Abbildung 6:** Gemessene Daten und Fitfunktion der  $\text{TEM}_{00}$ -Mode.

Die Fitparameter der Funktion sind

$$\begin{aligned}
 G_0 &= (3,5 \pm 0,4) \text{ A} \\
 \mu &= (1,18 \pm 0,13) \text{ mm} \\
 \sigma &= (0,6 \pm 0,4) \text{ mm}.
 \end{aligned}$$


#### 4.2.2 Beobachtung der $\text{TEM}_{10}$ -Mode

Um die  $\text{TEM}_{10}$ -Mode zu sehen muss ein dünner Draht in die Mitte des Strahles eingesetzt werden. Die so aufgenommenen Daten, sind in Tabelle 4 aufgelistet.

**Tabelle 4:** Aufgenommene Intensitäten für die Untersuchung der TEM<sub>10</sub>-Mode.

Abstand zum Strahlmittelpunkt $a$ / mm	Intensität $I$ / A
12,0	0,305
10,0	0,428
8,0	0,545
6,0	0,462
4,0	0,293
2,0	0,144
0,0	0,002
-2,0	0,046
-3,0	0,081
-4,0	0,105
-6,0	0,2
-8,0	0,215
-10,0	0,152
-12,0	0,076
-14,0	0,014

In den Daten sind zwei Maxima zu erkennen, daher wird pro Maximum eine Gaußfunktion angepasst. Diese beiden Gaußfunktionen werden addiert um den Gesamtverlauf darzustellen.

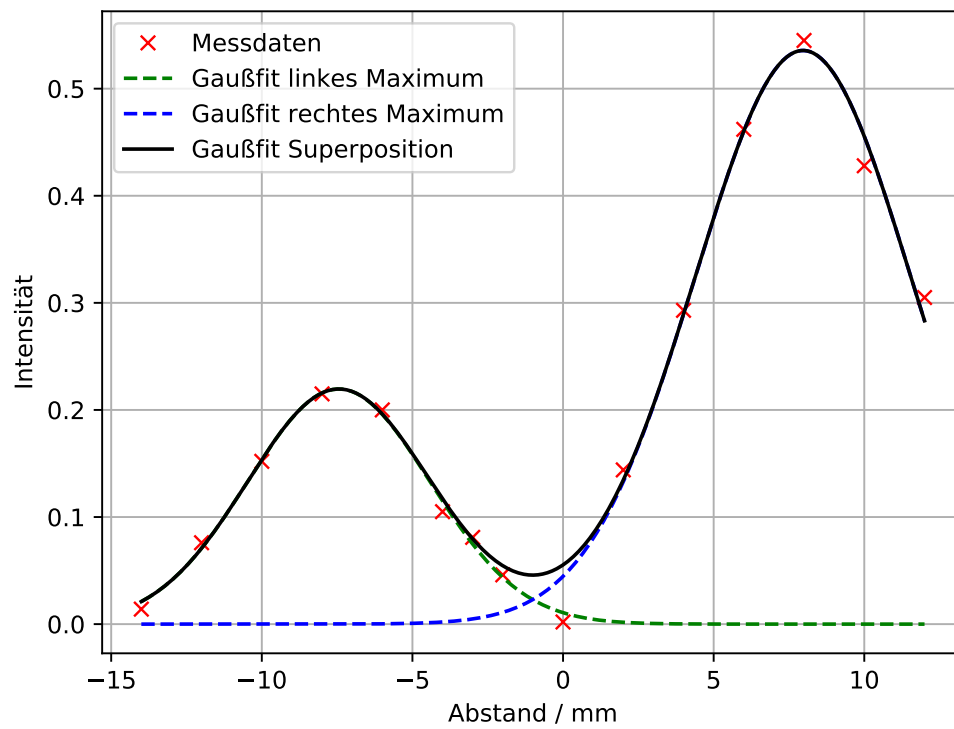

**Abbildung 7:** Gemessene Daten und Fitfunktion der TEM<sub>10</sub>-Mode.

Die Fitparameter der beiden Funktionen sind

$$\begin{aligned}
 G_{\text{links}} &= (0,220 \pm 0,005) \text{ A} & G_{\text{rechts}} &= (0,536 \pm 0,020) \text{ A} \\
 \mu_{\text{links}} &= (-7,45 \pm 0,08) \text{ mm} & \mu_{\text{rechts}} &= (7,97 \pm 0,17) \text{ mm} \\
 \sigma_{\text{links}} &= (3,03 \pm 0,08) \text{ mm} & \sigma_{\text{rechts}} &= (3,57 \pm 0,19) \text{ mm}.
 \end{aligned}$$

### 4.3 Bestimmung der Polarisation

Um die Polarisation zu messen, wird zwischen dem Auskoppelspiegel und dem Intensitätsmessgerät eine Polarisationsfilter aufgestellt. Die gemessenen Intensitäten sind in Tabelle 5 aufgelistet.


**Tabelle 5:** Intensität in Abhängigkeit des Winkels des Polarisationsfilters.

Winkel $\varphi$ / rad	Intensität $I$ / mW
0,0	0,0204
0,17	0,1355
0,35	0,388
0,52	0,756
0,7	1,120
0,87	1,564
1,05	1,879
1,22	2,193
1,4	2,324
1,57	2,345
1,75	2,204
1,92	1,984
2,09	1,614
2,27	1,250
2,44	0,814
2,62	0,464
2,79	0,186
2,97	0,023
3,14	0,010

Durch die gemessenen Daten kann die Funktion

$$I(\varphi) = A \cdot \sin(B(\varphi + C))^2 + D \quad (9)$$

gefittet werden. Die Messdaten und die Fitfunktion ist in Abbildung 8 dargestellt.

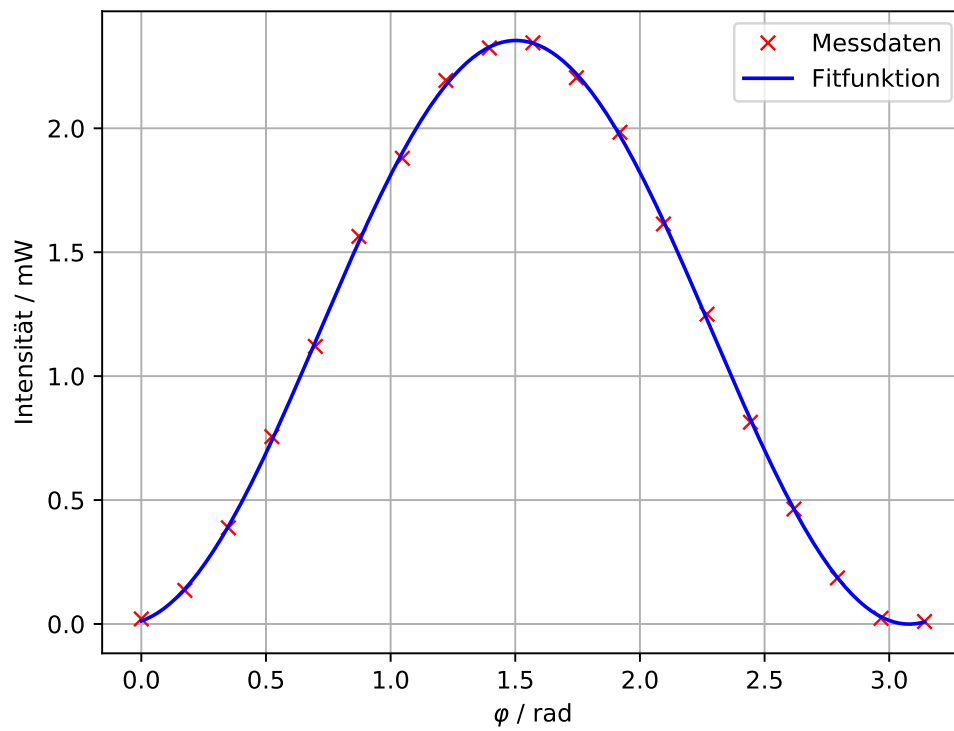

**Abbildung 8:** Messdaten und Fitfunktion für die Bestimmung der Polarisation.

Wie in Abbildung 8 zu sehen ist, lassen sich die Messdaten gut mit einer Funktion der Form (9) beschreiben. Die Fitparameter sind

$$\begin{aligned} A &= (2,355 \pm 0,010) \text{ mW} & B &= 0,996 \pm 0,005 \\ C &= (0,074 \pm 0,007) \text{ rad} & D &= (-0,001 \pm 0,009) \text{ mW}. \end{aligned}$$

#### 4.4 Bestimmung der Wellenlänge

Für die Bestimmung der Wellenlänge werden nacheinander zwei verschiedene Gitter in den Strahl gesetzt und die damit entstandenen Beugungsmaxima vermessen. Auf den Gittern ist die Anzahl der Linien pro Millimeter angegeben. Um den Gitterabstand zu bestimmen, wird der Wert mit dem Faktor 1000 multipliziert, dadurch wird die Anzahl der Linien pro Meter bestimmt und der Gitterabstand in Metern als Inverses des Wertes ermittelt. Die Gitterabstände der beiden Gitter sind in der Tabelle 6 aufgelistet.

**Tabelle 6:** Daten der verwendeten Gitter.

Gitter	#Linien / 1/mm	Gitterabstand $a$ / m
A	100	$1 \cdot 10^{-5}$
B	600	$1,67 \cdot 10^{-6}$

Die gemessenen Positionen der Beugungsmaxima sind in der Tabelle 7 aufgelistet. Bei der Messung der Beugungsmaxima von Gitter A war der Abstand von Schirm und Gitter  $d = 25 \text{ cm}$  und bei Gitter B  $d = 5 \text{ cm}$ . Mit dem Gitterabstand  $a$ , der Position der Beugungsmaxima  $b_n$  relativ zum Strahlmittelpunkt und dem Abstand  $d$  kann mit der Gleichung

$$\varphi_n = \arctan\left(\frac{b_n}{d}\right), \quad \lambda = a \cdot \frac{\sin(\varphi_n)}{n}$$

die Wellenlänge  $\lambda$  bestimmt werden. Die Winkel  $\varphi_n$  und die Wellenlänge sind ebenfalls in Tabelle 7 aufgelistet.



**Tabelle 7:** Messdaten für die Bestimmung der Wellenlänge des Lasers. Die Positionen der Maxima sind relativ zur Strahlachse, daher werden nur die Absolutwerte angegeben.

Position n	Gitter A			Gitter B		
	$b_n / \text{cm}$	$\varphi_n / \text{radian}$	$\lambda / \text{nm}$	$b_n / \text{cm}$	$\varphi_n / \text{radian}$	$\lambda / \text{nm}$
1	1,6	0,064	638,7	2,2	0,415	671,2
1	1,6	0,064	638,7	2,2	0,415	671,2
2	3,2	0,127	634,8	6,0	0,876	640,2
2	3,2	0,127	634,8	6,9	0,944	674,8
3	4,9	0,194	641,1	-	-	-
3	4,9	0,194	641,1	-	-	-
4	6,6	0,258	638,1	-	-	-
4	6,7	0,262	647,2	-	-	-

Die Wellenlänge aus 7 können noch gemittelt werden, dadurch werden die Wellenlängen  $\lambda_A = (639 \pm 4) \text{ nm}$  und  $\lambda_B = (664 \pm 14) \text{ nm}$  berechnet. Der Mittelwert dieser beiden Wellenlängen beträgt  $\lambda = (652 \pm 7) \text{ nm}$ .

## 5 Diskussion

### 5.1 Stabilitätsbedingung

Die Stabilitätsbedingung für die Spiegelkonstellation mit einem flachen und einem konkaven Spiegel, konnte nicht bis zu dem Theoriewert überprüft werden. Das kann daran liegen, dass diese Konstellation schwierig zu justieren ist. Daher ist der Laserstrahl auch bei geringen Abständen zusammengebrochen, sobald die Justierschrauben berührt wurden. Die Konstellation mit den zwei konkaven Spiegeln ist einfacher zu justieren, sodass hier die Stabilitätsbedingung soweit überprüft werden konnte, wie es der Versuchsaufbau zulässt.

### 5.2 Multimodenbetrieb

Bei diesem Versuchsteil soll die Schwebung der Intensität untersucht werden. Da die Steigungen der Geraden, welche an die Messdaten angepasst wurden, in der gleichen Größenordnung wie die theoretisch bestimmten Geraden liegt, kann damit die Theorie bestätigt werden. Dass die Theoriewerte nicht in den Unsicherheiten der Steigungen liegen, kann daran liegen, dass die Unsicherheiten nur durch die Fitfunktion erzeugt werden. Die Unsicherheiten von der Längen- oder Frequenzmessung werden nicht berücksichtigt, daher sind die Unsicherheiten der Steigung unterschätzt.

### 5.3 TEM-Moden

Die Messung der TEM-Moden hat nicht gut funktioniert, da zu wenig Daten aufgenommen wurden, sodass Abweichungen von der theoretisch erwarteten Kurve zu sehen sind. Die Abweichungen könnten mit mehr Statistik geringer werden. Die  $\text{TEM}_{00}$ -Mode lässt sich mit einem Gaußfit beschreiben, dies folgt auch aus der Theorie. Die  $\text{TEM}_{10}$ -Mode müsste sich mit einem Hermite-Polynom der ersten Ordnung multipliziert mit einer Gaußfunktion beschreiben lassen. Durch die unterschiedlichen Maximalintensitäten links und rechts vom Mittelpunkt, lässt sich eine entsprechende Funktion nicht an die Daten anpassen. Daher wurden an die beiden Maxima jeweils ein Gaußfit angepasst und die Superposition gebildet. Da die Parameter der Gaußfunktion in der gleichen Größenordnung liegen und nur die Amplitude abweicht, bestätigt das die Theorie. Nur das rechts vom Minimum generell höhere Intensitäten gemessen wurden, was auf einen systematischen Fehler hinweist.

### 5.4 Polarisation

Die gemessene Verteilung der Polarisation stimmt mit der Theorie überein. Da das Intensitätsmaximum bei  $\varphi = 1,5 \text{ rad} \approx 86^\circ$  liegt, muss der Laserstrahl nahezu parallel zum Tisch polarisiert gewesen sein.

## 5.5 Wellenlänge

Die gemessene Wellenlänge liegt bei  $\lambda = (652 \pm 7) \text{ nm}$ . Der Literaturwert liegt bei  $\lambda_{\text{lit}} = 633 \text{ nm}$  [6]. Die Wellenlänge die nur mit Gitter A bestimmt wurde, liegt näher an dem Literaturwert, da mehr Maxima bestimmt werden konnten. Der Literaturwert liegt zwar nicht in den Unsicherheiten der gemessenen Werte, jedoch sind die Messwerte in der richtigen Größenordnung.

## Literatur

- [1] Wolfgang Demtröder. *Laserspektroskopie 1 (Grundlagen)*. Springer-Verlag, 2011.
- [2] TU Dortmund. *V61 Helium-Neon-Laser*. 2020.
- [3] DrBob. *Laguerre-gaussian*. 2004. URL: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4008320>.
- [4] Jürgen Jahns. *Photonik (Grundlagen, Komponenten und Systeme)*. Oldenbourg-Verlag, 2001.
- [5] Jürgen Eichler Joachim Eichler. *Laser (Bauformen, Strahlführung, Anwendungen)*. Springer-Verlag, 2015.
- [6] Joachim Hertz Stiftung. *Helium-Neon-Laser*. 2021. URL: <https://www.leifiphysik.de/atomphysik/laser/versuche/helium-neon-laser>.